


NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

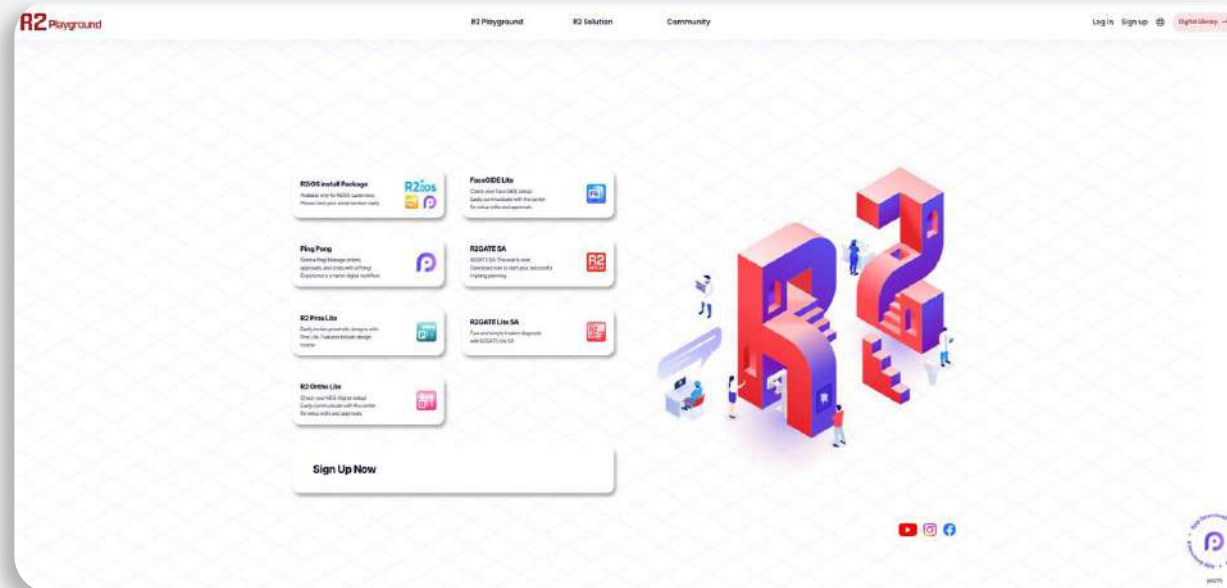

Neuen Account erstellen

Konten von R2gate.com sind nicht aktiv, der Nutzer muss ein neues Konto auf R2playground.com erstellen



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de




MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

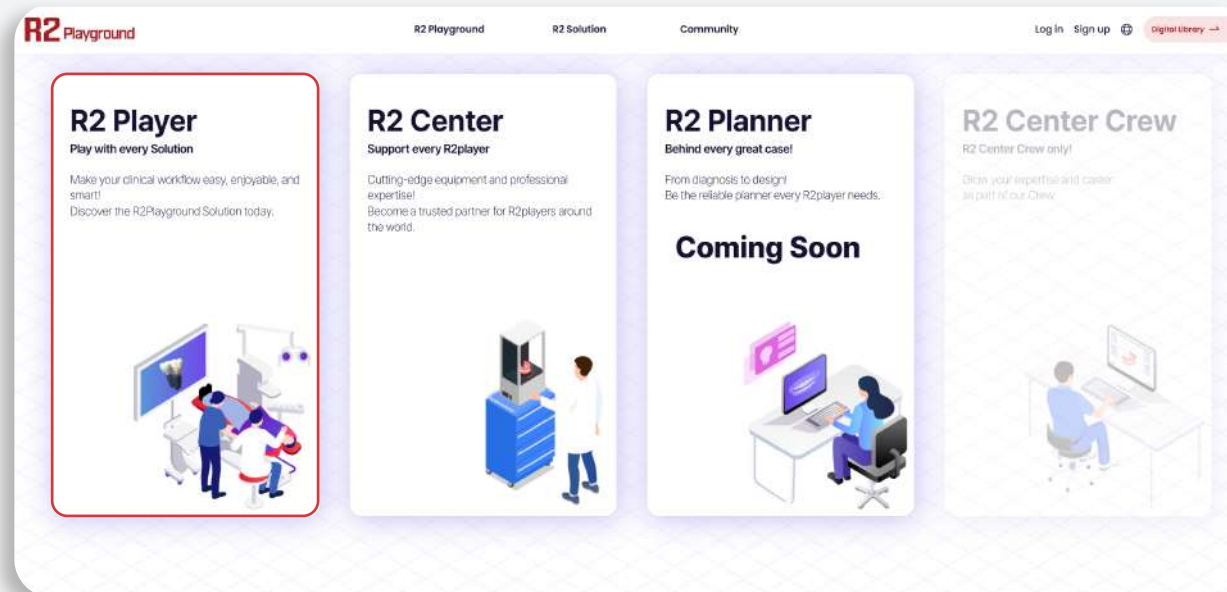

R2 Player Account erstellen

Klicken Sie dafür auf den linken Button.



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

The screenshot shows the 'Sign up' page on the R2 Playground website. The page has a white background with a subtle pattern. At the top, there is a navigation bar with 'R2 Playground', 'R2 Solution', and 'Community' links. On the right, there are links for 'Log in', 'Sign up', and 'Sign up already'. The main heading is 'Sign up' with a small illustration of two people. Below this, a central box titled 'STEP 2 Email Registration Verification' contains the following fields and buttons:

- Email:** A label above two input fields.
- First Name:** A text input field with the placeholder 'Enter the email to be used as first name'.
- Last Name:** A text input field with the placeholder 'Enter the email to be used as last name'.
- Verify Email:** A button with the text 'Verify Email'.

Einloggen

Die Registrierung mit Ihrer vorher genutzten Mailadresse von R2Gate.com und Passwort sind möglich.



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com



Office address *

Musterstraße

12

Falls die Registrierung fehlschlägt

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Adress Daten in beide Zeilen eingeben.



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de




MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

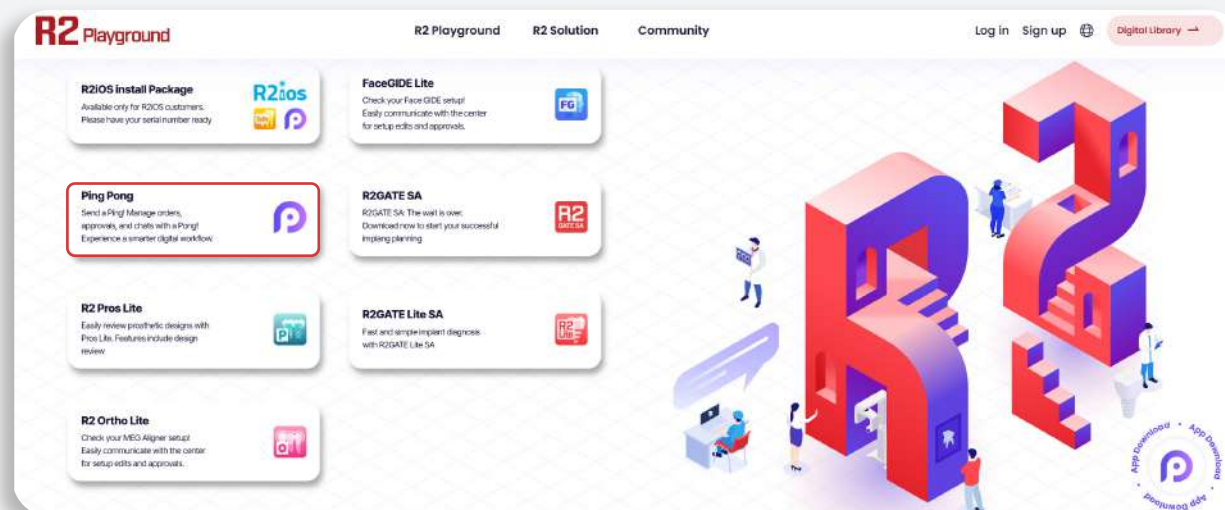

Auftrag erstellen

Bestellungen können über die Ping-Pong-Software aufgegeben werden. Laden Sie diese auf der Website von R2playground herunter.



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140




Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

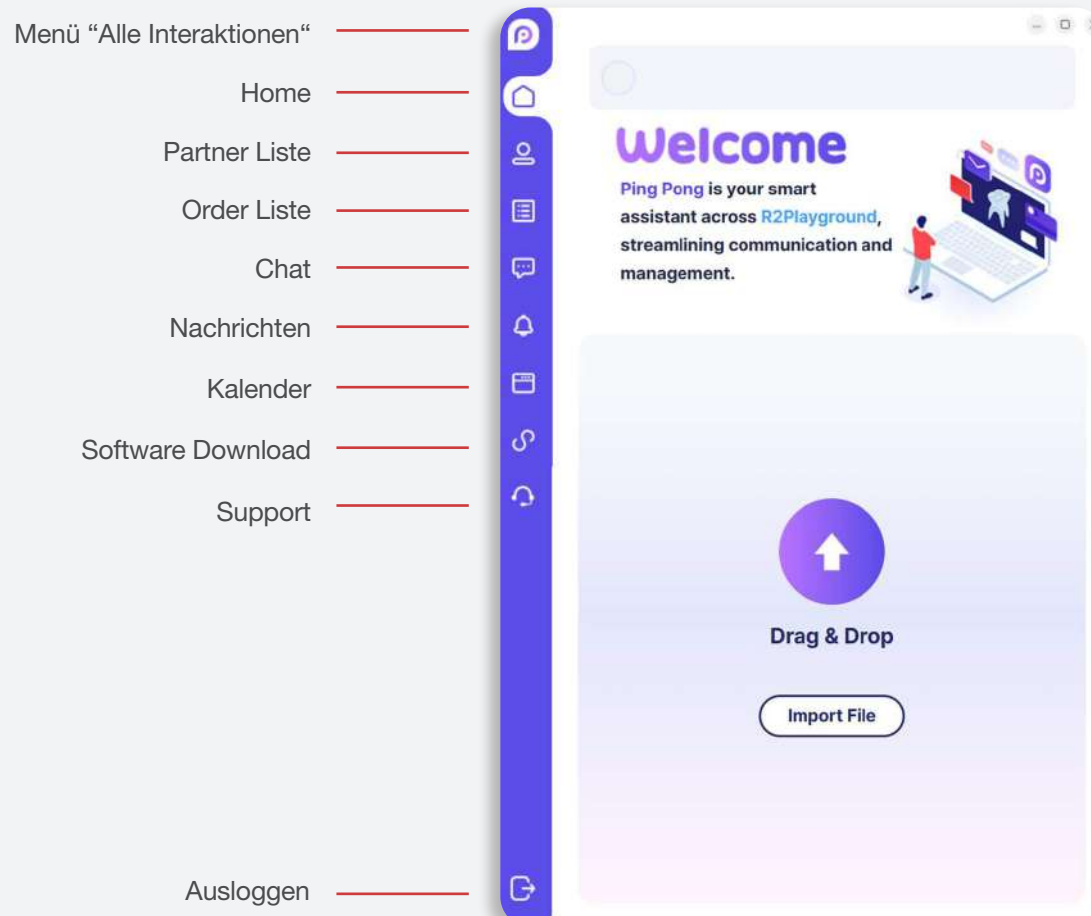

Ping Pong Menü

Das abgebildete Menü sollte nun bei Ihnen sichtbar sein.


 **Hotline MegaGen DE:**
+49 6221 - 4551140

 **Email:**
info@imegagen.de

 **MegaGen F.D. GmbH**
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

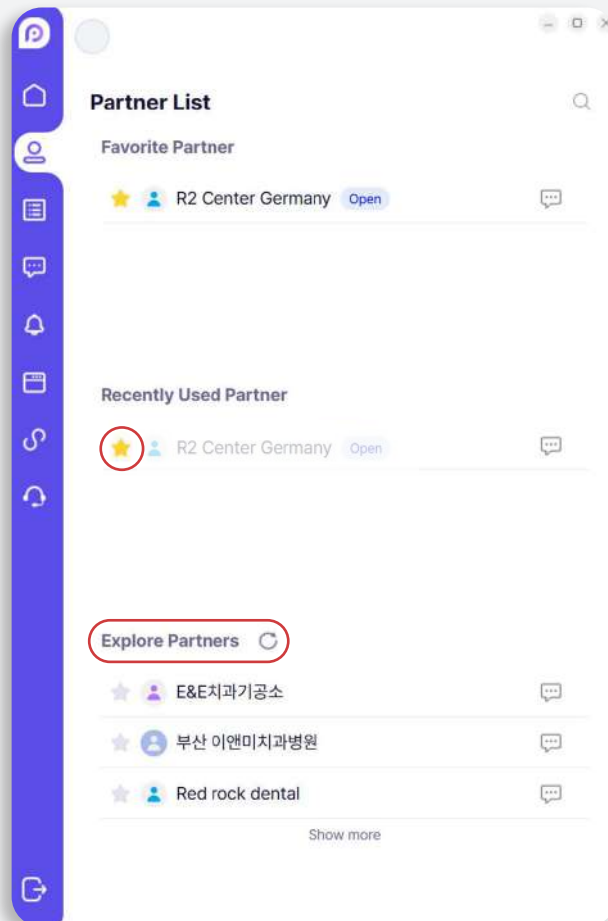

Um ihr R2 Center zu finden, geben Sie den Namen in das Suchfeld ein: z.B. R2 Center Germany

Fügen Sie Ihr Lieblings-R2 Center zu Ihren Lesezeichen hinzu

Liste R2 Center

R2 Center Partner

Hier erhalten Sie eine Übersicht über Ihre R2 Center


 **Hotline MegaGen DE:**
+49 6221 - 4551140

 **Email:**
info@imegagen.de

 **MegaGen F.D. GmbH**
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

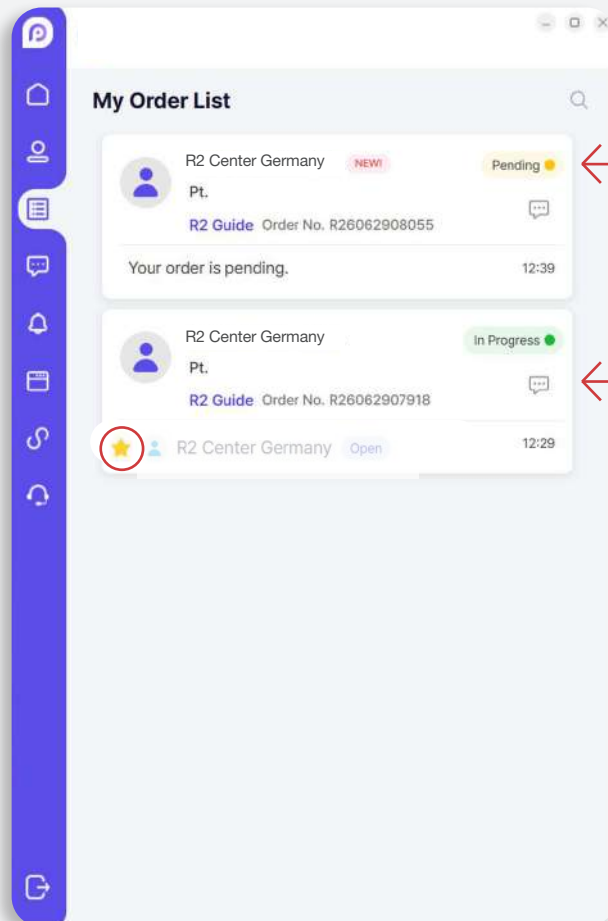

Order Status

Schnellzugriff auf den Chat

Order Liste

Die Chat-Registerkarten sind den Bestellungen zugeordnet, in diesem Fall erhält das R2 Center eine Nachricht zu einer bestimmten Bestellung.



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de




MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com



R2GATE™
by MEGA'GEN

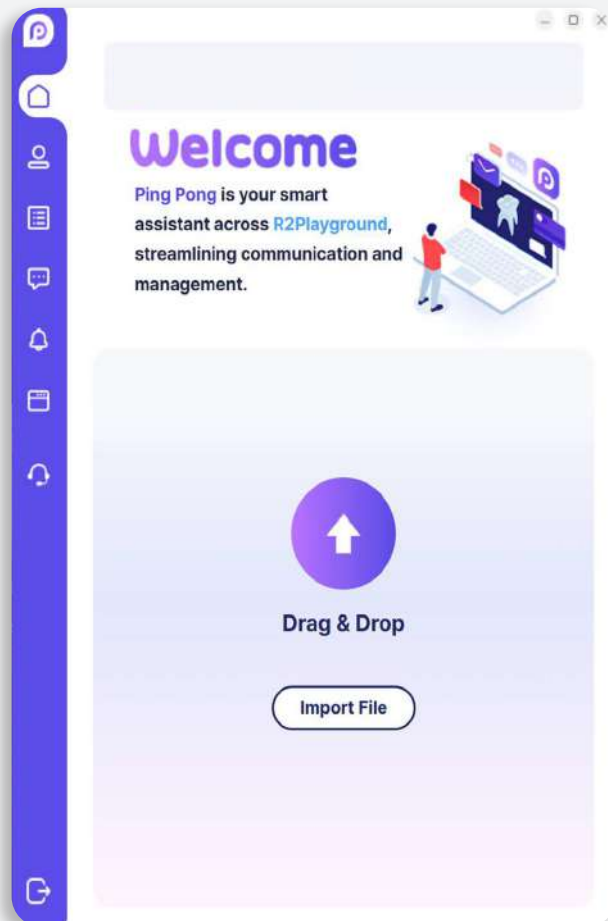

So geben Sie eine Bestellung auf

DICOM-Dateien komprimieren und per Drag & Drop auf die Startseite ziehen.

DVT im .dcm Format und in einzelnen Schnittebenen

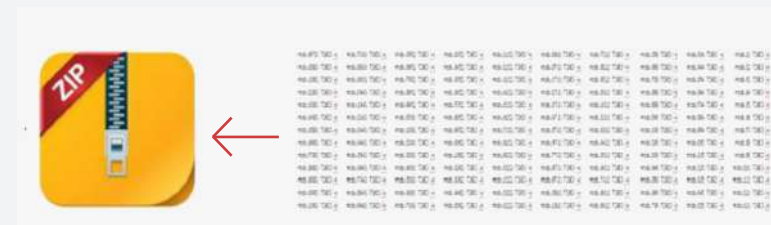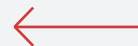

Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

The screenshot shows a web interface titled "Your Files are ready! Please select a service." It features a form for patient information (Pt. Name, Patient name, Zip) and a grid of service options: R2 Guide, MEG Aligner, C&B, Face Guide, and QVD. A red arrow points from the "Nur Guide" label to the R2 Guide option. Another red arrow points from the "Behandlungsplan auswählen" label to the C&B option. A third red arrow points from the "Guide & Prothetik" label to the C&B option. At the bottom, there are two buttons: "Proceed to Order" and "Cancel Order". A red arrow points from the "Weiter zu den Bestelldetails" label to the "Proceed to Order" button.

So geben Sie eine Bestellung auf

Name des Patienten eingeben

Behandlungsplan auswählen

Weiter zu den Bestelldetails



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de




MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

So geben Sie eine Bestellung auf

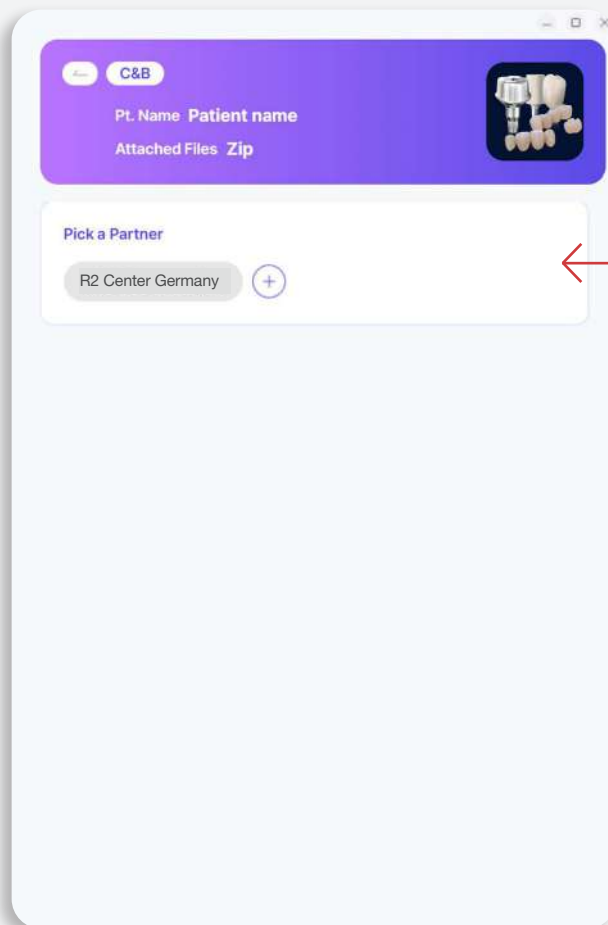

The screenshot shows a web application interface for placing orders. At the top, there is a purple header bar with a back arrow, a 'C&B' tab, and a thumbnail image of dental models. Below the header, there are two input fields: 'Pt. Name: Patient name' and 'Attached Files: Zip'. The main section is titled 'Pick a Partner' and contains a list of partners. The first partner, 'R2 Center Germany', is highlighted with a grey background and a plus icon to its right. A red arrow points from the text 'Wählen Sie das R2 Center' to this highlighted partner.

Wählen Sie das R2 Center



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

So geben Sie eine Bestellung auf

The screenshot shows a web interface for placing an order. At the top, there's a purple header with 'C&B' and a patient name field. Below that is a 'Pick a Partner' section with a button for 'R2 Center Germany'. The 'Order details' section contains a grid of buttons for different dental services: Crown, Bridge, In/On-lay, Veneer, Custom abutment, PMMA Abutment, PFZ, ZrGEN, TiGEN, Cuff-TiGEN, and Provisional. There's a 'Show more' link below the grid. A checkbox for 'Design Only (Design service only.)' is present. The 'Comments' section has a text area for additional options and comments.

Wählen Sie die gewünschten Bestelldetails aus

nur STL-Dateien

Details zur bevorstehenden Behandlung



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com

R2GATE™
by MEGA'GEN

So geben Sie eine Bestellung auf

The screenshot shows a web interface for placing an order. At the top, there's a purple header with a back arrow, 'C&B', 'Pt. Name Patient name', and 'Attached Files Zip'. Below this is a section for adding files, with a plus icon and text: 'Add file * You can upload up to 10 files. If you have any files related to the order, please attach them.' Below that is a 'Select Due Date' section with a date picker showing '06/07/2026' and a calendar for June 2026. The calendar has days of the week (SUN to SAT) and dates (1 to 30). The date 29 is highlighted in blue.

Laden Sie hier STL-Dateien oder weitere Dateien hoch

Liefertermin auswählen

Lieferzeiten R2Center Germany:

- 5 Werktagen für Planungsvorschlag
- 5 Werktagen ab Überprüfung für Herstellung Bohrschablone und Versand
- 7 Werktagen für Bohrschablone inkl. Abutments und provisorischer Versorgung
- All-on-X 15 Werktagen für Bohrschablone und LZP

 **Hotline MegaGen DE:**
+49 6221 - 4551140

 **Email:**
info@imegagen.de

 **MegaGen F.D. GmbH**
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com



So geben Sie eine Bestellung auf

C&B

Pt. Name Patient name

Attached Files Zip

Details about case

Order files

Included File List (1)

Add file

You can upload up to 10 files

+


If you have any files related to the order, please attach them.

Select Due Date

(Default: 7 days from today)

29/07/2026

Order Completed

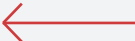

Bestellung aufgeben



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland

NEUER BESTELLPROZESS

R2Playground.com



So geben Sie eine Bestellung auf



Order completed

Please see below for details



C&B

Pt. Name	Patient name
Attached Files	Zip(1) 
Order Option	-
Partner	MGG EU education
Due Date	2026.07.28
Comments	
Details about case	

Orderer information (ID, clinic name, representative, contact, address, etc.) will be shared with the partner for order processing.

Order List

Open Order Chat



Zusammenfassung der Bestellung



Hotline MegaGen DE:
+49 6221 - 4551140



Email:
info@imegagen.de



MegaGen F.D. GmbH
Am Bahnbetriebswerk 5
69115 Heidelberg
Deutschland